

オーディオロジーニュース

群馬県立聾学校
発行：聴能支援係
令和7年度 No.2

新しい補聴援助システムを導入中です

昨年度の、中学部の視聴覚室に加えて、体育館、高等部のテキスタイルデザイン室、小学部のプレイルーム、幼稚部の遊戯室にも、ロジャータッチスクリーンマイクと線音源スピーカーを導入しました。

ロジャーの受信機がついている幼児・児童・生徒には、上記の大きな部屋でも、距離に関係なく先生の話聞くことができます。

受信機がなくても、線音源スピーカーによって、距離による音の減衰が少なく、反響や残響も抑えることで、明瞭な音声を教室や会議室などの後方まで届けることができます。

また、新しいフォナックの補聴器は、ロジャーダイレクトといって、受信機を購入しなくても、補聴援助システムが使えるようになる補聴器もあり、福祉の基準額で購入できます。

対象の補聴器を使っている幼児・児童・生徒の保護者には、ロジャーダイレクトをインストールしてよいか同意書で確認を取っています。

今後、教室でも補聴援助システム（ロジャー）を導入する予定です。

次の補聴器を購入する際は、ご検討ください。

もちろん、人工内耳や他のメーカーの補聴器をお使いの方も、受信機を購入すれば使えるようになります。



フォナック補聴器「きこえのブログ」より引用



補聴器や人工内耳のお手入れはしていますか？

補聴器や人工内耳の管理ができていないと・・・

(例)



耳垢が溜まって聞こえない

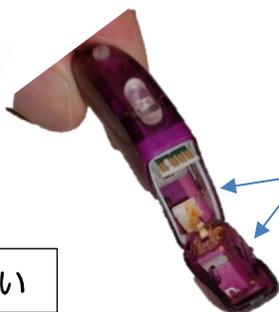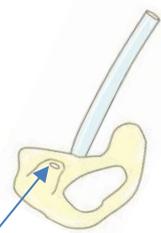

埃やサビで電源が入らない



こんなことが起こっていませんか？

定期的に掃除をしないと耳垢等の汚れがたまったり、サビがついたりして、正常に機能しないことがあります。衛生的にも体に良くありません。掃除の方法を覚えて、自分で管理できるようにしましょう。

〈掃除方法(例)〉

イヤモールド

- 水洗いをしてティッシュで拭きます。
- 穴の中の汚れは歯間ブラシが便利です。
- 中に水が溜まっていると聞こえません。プロアーやこよりを使って取り除きましょう。

※材質によってはアルコールを使うと溶けますのでご注意ください。(購入時に確認してください)



電池フォルダーやバッテリー接続部分

- アルコールで湿らせた綿棒で軽く擦ります。
- ※純粋なアルコール推奨。香料等の成分が入っていると故障の原因になります。

寒い時期にはご注意ください！

寒い時期には補聴器やチューブに結露が発生する可能性が高くなります。結露が原因でチューブ内が詰まってしまうと補聴器から音が出なくなります。

☆チューブの中に結露が発生した場合はプロアーやこよりを使って取り除きます。



その他、不明な点がある場合は、聴能支援係に御相談ください。

各学部担当 幼稚部：大山 小学部：青柳、稲田 中学部：飯田、中村 高等部：有馬